

Den geöffneten Beutel durch Umfalten verschließen / Always fold-over top of foil pack after opening



Golmed
PARTNER  medizintechnik

Kaulenbusch 1A | 38126 Braunschweig
info@golmed.de | Tel. +49 (0) 531 230 437-0
www.golmed-shop.de



the.better.choice

Einmal-Elektroden für das EKG

Disposable Electrodes for ECG

Electrodes pour ECG usage unique

Elettrodi per ECG monouso

Electrodos para ECG de uso nico

Disposable elektroden voor ECG


Engångselektroder for ECG

Inhalt / Contents

30 Stück / Pieces



Klasse I

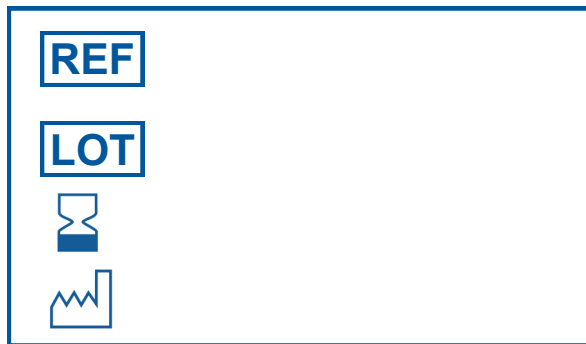

Revisionsstand: 03/2026

Made in Germany



MTG Imiella Medizintechnik e.K.
Oelsnitzer Straße 10
09385 Lugau | Germany



www.golmed-shop.de



Gebrauchsanweisung EKG-Elektroden

Einsatzgebiet / Warnhinweise:

Ableitung bioelektrischer Signale von der unverletzten Haut. Die Elektroden müssen von entsprechend ausgebildeten medizinischen Fachpersonal am Patienten appliziert werden. Möglicherweise auftretende allergische Reaktionen oder Hautunverträglichkeiten ärztlich begutachten. Verwendung nur mit zugelassenen Patienten-kabel und/oder Adapter. Nicht in Kontakt mit elektrischen Fremdspannungen bringen. Dieses Produkt ist ein medizinischer Einwegartikel und darf nur einmal verwendet werden. Elektroden bei denen das Gel ausgetrocknet ist dürfen nicht verwendet werden. Bei versehentlichem Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen. Bei einem elektrochirurgischen Eingriff dürfen die EKG-Elektroden nicht so nah am Operationsfeld wie die Neutralelektrode (Erdung) angebracht werden.

1. Öffnen des Beutels an der markierten Linie
2. Festlegen der Applikationspunkte. Ausgewählte Hautpartien von Creme, Schmutz oder anderen Trennschichten befreien. Nicht auf ungereinigte Haut aufbringen, da sonst keine sichere Haftung und Signalableitung
3. Elektrode von der Griffflasche her von der Schutzfolie abheben
4. Elektrode platzieren und auf die Haut leicht andrücken
5. Patientenleitung konnektieren, bei druckempfindlichen Hautpartien Elektrode vor Anlegen an die Haut konnektieren

Anwendungsdauer: Bei mehrtägiger Anwendung täglich festen Sitz und applizierte Hautfläche kontrollieren. Die Elektroden sind nicht repositionierbar.

Lagerung: In Originalverpackung wettergeschützt zwischen -13 °C und +28 °C. Haltbarkeitsdauer beachten. Angebrochene Beutel zügig verbrauchen, verbleibende Elektroden durch umknicken der Beutelöffnung vor Feuchtigkeitsverlust schützen. Elektroden nicht außerhalb der Elektrodenbeutel lagern!

Entsorgung: Als Hausmüll, PVC- und Latex-frei, Verpackung der stofflichen Wiederverwertung zuführen.

Wir haften nicht für Schäden, die durch Nichtbefolgung dieser Gebrauchsanweisung, Missbrauch oder durch Fehler bei der Anwendung dieses Produktes in irgendeiner Weise entstehen.

Instruction for use ECG-electrodes

Application / Warnings:

Derivation of bioelectric signals from the intact skin. The electrodes must be applied by trained medical personnel to the patient. Possibly occurring allergic reactions or skin sensitivities examine medically. Not suitable for use on newborn and premature infants! Use only with approved patient cables and / or adapters. Not be in contact with external electrical voltages. This product is a medical disposable and may be used only once. Electrodes in which the gel has dried may not be used. Consult a doctor immediately in case of accidental ingestion. In an electro-surgery, the ECG electrodes may not be placed as close to the surgical field as the neutral electrode (ground).

Directions for use:

1. Open the bag at the marked line
2. Setting the application points. Selected skin parties have to be cleaned of dense hair, cream, dirt or other interfaces. Do not apply to uncleaned skin, otherwise no reliable adhesion and signal leakage
3. Withdraw the electrode from the griptab by the protective film
4. Place the electrode and press it to the skin
5. Contact the patient lead, in case of pressure sensitive skin contact electrode prior to application to the skin

Duration of use: Check daily tightness and applied skin surface if the electrode is used for several days. The electrodes are not repositionable.

Storage: In their original packaging protects from the weather between -13 °C und +28 °C. Note shelf life. Consume partially used bags quickly, protect remaining electrodes by folding over the bag opening against moisture loss. Do not store the electrodes outside the original packaging (bag)!

Disposal: Dispose as household waste, PVC and latex-free, recycle packaging

We are not liable for damages caused by non-compliance with these instructions, abuse or caused by errors in the application of this product in any way.